

# SONDA TRANSPILÓRICA CON LASTRE Y MANDRIL

Cód. 398-S (silicona) 398-P (poliuretano)



## VÍA DIGESTIVA




Producto diseñado para pacientes imposibilitados de ingerir alimentos y medicamentos por vía oral. Pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto. Pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con pancreatitis.

- Permite la administración de alimentos especialmente preparados para la cavidad intestinal.
- Marcada cada 10 cm.



- Incluye adaptador para conexión ENFit según Norma ISO 80369-3:

- Evita las conexiones incorrectas y asegura que solo la nutrición enteral pueda ser administrada.
- Reduce los riesgos de conexión errónea
- Es incompatible con los conectores Luer y otros conectores de diámetro pequeño, lo que aumenta la seguridad del paciente.
- Garantiza una administración óptima brindando una conexión segura y libre de fugas.

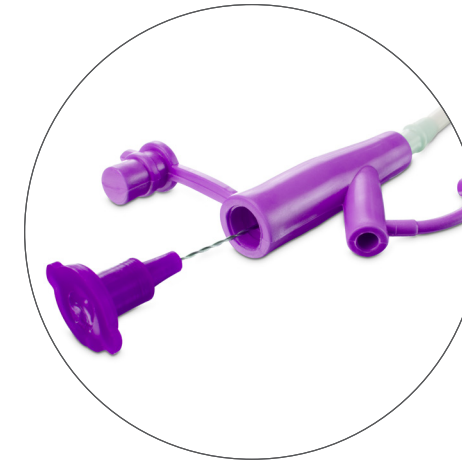

Mandril semi-rígido, facilita la colocación.



Extremo distal cerrado con orificios laterales.

	Código 398-P-E	Calibre	Peso punta lastrada (gr)
Poliuretano		398-08-P-E	0,2 - 2
		398-10-P-E	2 - 4
		398-12-P-E	2 - 4
	<i>Poliuretano versión no reinsertable</i>	398-08-P-E	0,2 - 2
	398-10-P-E	0,2 - 2	
	398-12-P-E	0,2 - 2	

	Código 398-S-E	Calibre	Peso punta lastrada (gr)
Silicona		398-08-S-E	0,2 - 2
		398-10-S-E	2 - 4
		398-12-S-E	4 - 6
		398-06-S-E	0,2 - 2
		398-08-S-E	0,2 - 2
		398-10-S-E	0,2 - 2
		398-12-S-E	2 - 4
		398-14-S-E	2 - 4
	398-16-S-E	2 - 4	

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)	Radiopacidad	Orificios	Versión
398-08-P-E	8,0	2,70	1,50	120	ORX	4	No reinsertable
398-10-P-E	10,0	3,30	2,00	125	ORX	4	No reinsertable
398-12-P-E	12,0	4,00	2,50	125	ORX	4	No reinsertable
398-08-P-E	8,0	2,70	1,50	120	ORX	2	Reinsertable
398-10-P-E	10,0	3,30	2,00	125	ORX	2	Reinsertable
398-12-P-E	12,0	4,00	2,50	125	ORX	2	Reinsertable

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)	Radiopacidad	Orificios	Versión
398-06-S-E	6,0	2,00	1,00	105	ORX	3	No reinsertable
398-08-S-E	8,0	2,70	1,50	105	ORX	4	No reinsertable
398-10-S-E	10,0	3,30	2,00	125	ORX	4	No reinsertable
398-12-S-E	12,0	4,00	2,50	125	ORX	4	No reinsertable
398-14-S-E	14,0	4,70	3,00	125	ORX	4	No reinsertable
398-16-S-E	16,0	5,30	3,50	125	ORX	4	No reinsertable
398-08-S-E	8,0	2,70	1,50	105	L-ORX	2	Reinsertable
398-10-S-E	10,0	3,30	2,00	125	L-ORX	2	Reinsertable
398-12-S-E	12,0	4,00	2,50	125	L-ORX	2	Reinsertable