

Catéter epicutáneo cava


Cód. 540-541



Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.

- Tubuladura de 100% silicona radiopaca.
- Marcación centimétrica.
- En el extremo del prolongador tiene un racor de conexión que permite la sujeción o la separación del catéter de forma sencilla, facilitando retirar el introductor butterfly.
- Larga permanencia, máxima visualización con rayos X.

Catéter
100%
Silicona

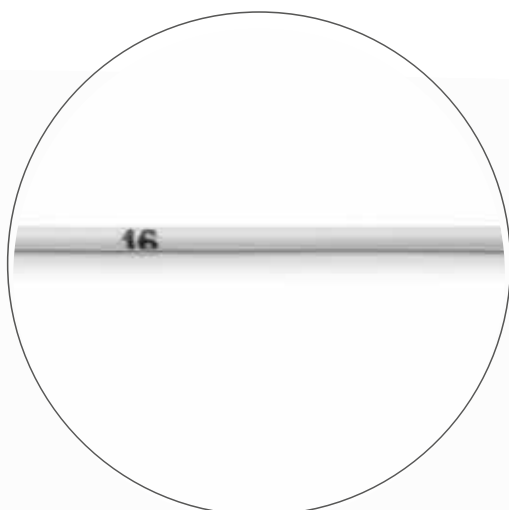

Numerado cada cm para verificar el posicionamiento correcto.



*Clamp de
cierre*



Conector seguro y efectivo.

Catéter epicutáneo cava


Cód. 540-541




Esquema de colocación



Quitar el introductor de manera recta para evitar que la punta o el bisel dañen o perforen al catéter.

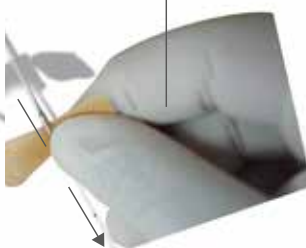

Conectar el Racor

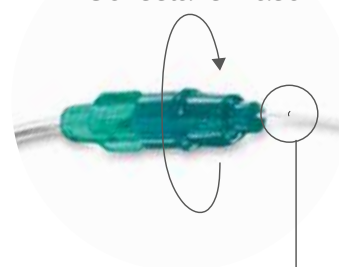

El catéter posee una marcación la cual debe coincidir con el extremo del racor para asegurar la correcta colocación.

(A)



(B)



(C)



Kit:

- (A) 1 Catéter 100% silicona, radiopaca y ecogénico,
- (B) 1 cinta métrica descartable,
- (C) 1 introductor tipo butterfly.

Catéter Epicutáneo Cava - FR 2,0

Código	Longitud (cm)	Ø Interior x Ø Exterior (mm)	* Flujo (ml/min)
540-15	15,00	0,30 X 0,60	5,00
540-30	30,00	0,30 X 0,60	3,00

* Medición realizada a 1 bar de presión.

Catéter Epicutáneo Cava - FR 1,8

Código	Longitud (cm)	Ø Interior x Ø Exterior (mm)	* Flujo (ml/min)
541-15	15,00	0,28 X 0,57	3,50
541-30	30,00	0,28 X 0,57	2,00

* Medición realizada a 1 bar de presión.