

Botón gástrico

Cód. 350



Producto diseñado para introducirse en la cavidad gástrica a través de un ostoma estable realizado previamente. Utilizado para la administración directa de alimentos en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto. Pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y/o pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

- Permite la administración de alimentos naturales directo a la cavidad gástrica.
- No requiere mantenimiento.
- El diseño de la cabeza evita la extracción accidental.
- El bajo perfil del dispositivo resulta cómodo para las actividades habituales de los pacientes.

Botón
100%
Silicona



100% silicona
(cabeza radiopaca)

Válvula antirretorno de silicona.



Su gran elongación reduce el diámetro de la cabeza, permitiendo una colocación más sencilla y menos traumática para el paciente.




Botón gástrico

Cód. 350




1. Halar (pull) hacia arriba los extremos del blíster.

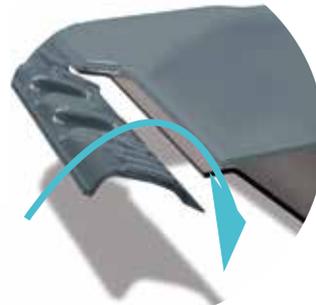

2. Al halar, la pestaña gira hacia adentro separando la tapa de la bandeja inferior.

Blíster botón gástrico

- *Presentación: caja + sobre pelable + blíster bandeja.*
- *Blíster estéril con tapa de rápida apertura, apto para colocar sobre el campo quirúrgico una vez removido el sobre pelable.*
- *Tapa translúcida para la perfecta visualización del producto dentro del blíster.*
- *Componentes del producto organizados según secuencia de uso.*

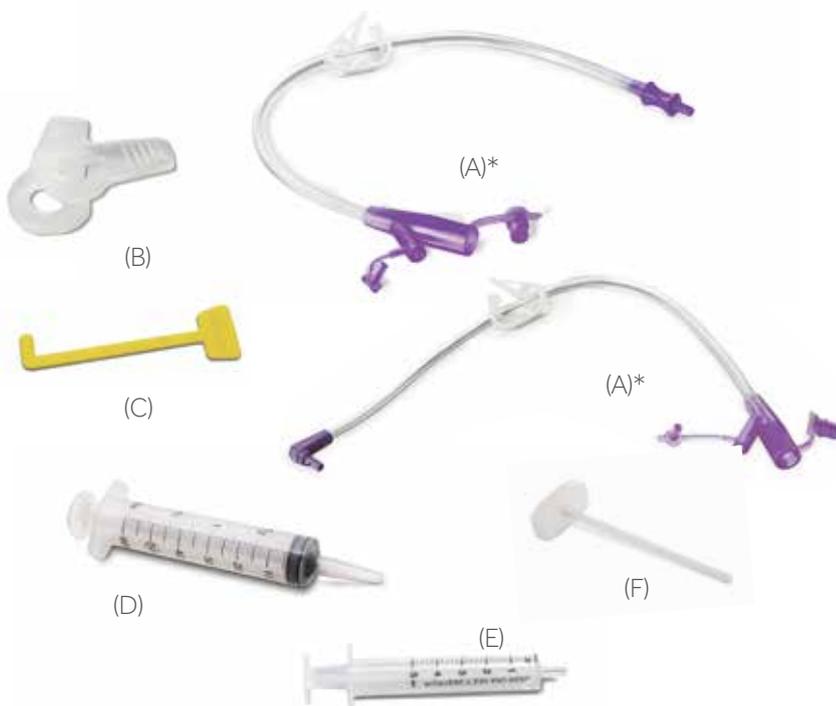

Kit:

- (A) 2 tubos de alimentación.
- (B) 2 suplementos de 100% silicona.
- (C) 1 medidor de pared abdominal.
- (D) 1 jeringa tipo Toomey.
- (E) 1 jeringa tipo luer slip.
- (F) 1 mandril para colocación.

(A)* Se comercializa un kit de accesorios de reposición con dos prolongadores para alimentación.

Tubos de conexión únicos para el diseño del botón Silmag.

Botón gástrico

Cód. 350



Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)
350-18-12	18,0	6,00	1,20
350-18-17	18,0	6,00	1,70
350-18-24	18,0	6,00	2,40
350-18-34	18,0	6,00	3,40
350-20-17	20,0	6,70	1,70
350-20-24	20,0	6,70	2,40
350-24-12	24,0	8,00	1,20
350-24-17	24,0	8,00	1,70
350-24-24	24,0	8,00	2,40
350-24-34	24,0	8,00	3,40
350-24-44	24,0	8,00	4,40



Sistema de anclaje:

(A) Alinear la pestaña del conector con la marcación del botón.

(B) Introducir el conector.

(C) Girar 90°.

- Proceder de igual manera en la conexión del conector recto.
- Descompresión gástrica: la descompresión se realiza por medio del tubo de alimentación.



Tubos de conexión únicos para el diseño del botón Silmag.

Kit de reposición: asegura la durabilidad prolongada del producto.

Código	Denominación	Elementos del kit
TP-350	Prolongador para botón gástrico	Un tubo de alimentación con conector 90° de 50 cm de longitud
		Un tubo de alimentación con conector recto de 30 cm de longitud

Se comercializa un kit de accesorios de reposición con dos prolongadores para alimentación.