

ArterialCath



SALVANDO VIDAS

www.gruposilmag.com



BSI British Standards Institution
Quality Management System
Nº FM 664794
ISO 13485

17/03/26 Rev. 0.1

Catéter Arterial



ArterialCath

Cód. 530



ACCESOS
VASCULARES

Catéter arterial periférico indicado para el **acceso arterial a corto plazo** (hasta 30 días) en pacientes pediátricos (>3,5 kg) y adultos.


Se utiliza principalmente en pacientes críticos o inestables para:

- **Medición invasiva continua** de la presión arterial.
- **Toma repetida de gases en sangre arterial.**
- **Obtención frecuente de muestras para laboratorio.**




PRINCIPALES VENTAJAS

- ✓ **Color rojo** para identificación clara del acceso arterial.
- ✓ **Conector alado** para mayor estabilidad.
- ✓ **Guía con punta flexible** para facilitar la técnica de Seldinger.
- ✓ **Catéter de poliuretano (PUR) con forma cónica** que facilita la inserción.
- ✓ Material que **optimiza la transmisión de la onda de presión arterial.**
- ✓ **Flexibilidad modular** que permite la libre elección del prolongador o conexión según criterio clínico.

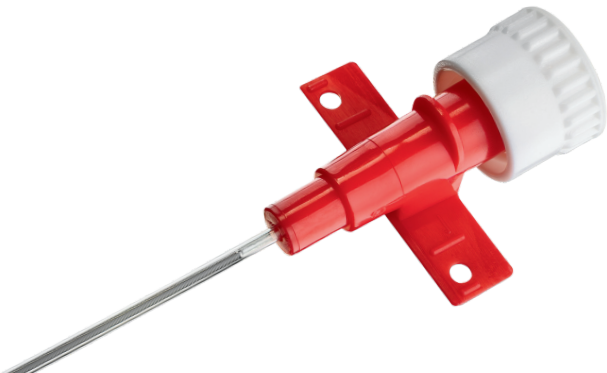

COMPONENTES

- A:** Catéter arterial de poliuretano con 3 líneas radiopacas.
- B:** Aguja introductora ecogénica diseñada para optimizar la visualización bajo guía ecográfica, permitiendo una punción precisa y segura durante el acceso vascular.
- C:** Guía recta con extremo distal flexible que facilita la navegación y reduce el riesgo de traumatismo tisular durante la inserción.
- D:** Funda protectora para guía y catéter.

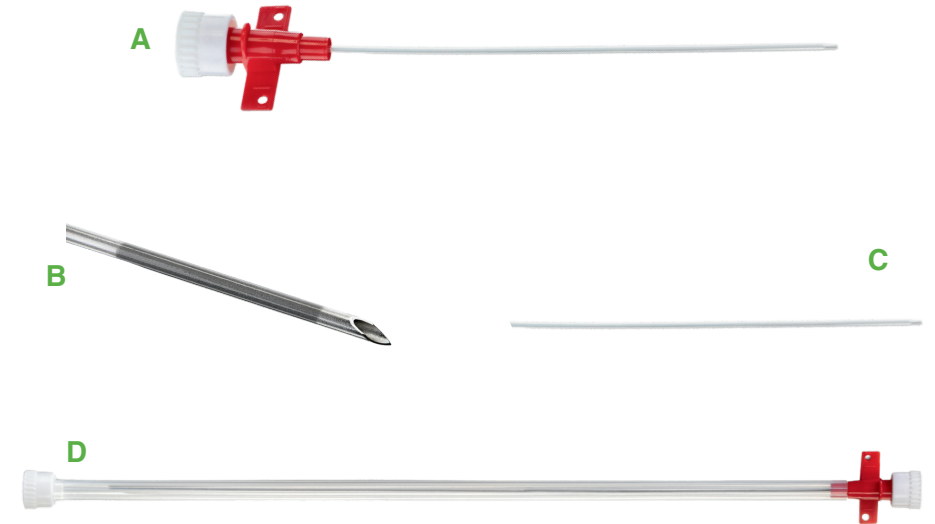

Código	Calibre	Longitud del catéter	Longitud de la guía	Aguja introductora
530-30-08	3 Fr	8 cm	20 cm	20G x 5 cm